

Important : Une mise hors service de la pompe pendant une période prolongée ou une charge trop longue de la batterie peut provoquer une mise en sécurité de la pompe.

Si la pompe ne s'allume pas immédiatement, maintenir la touche ON/OFF appuyée pendant au moins six secondes, jusqu'au clignotement des leds. Cela entraîne une réinitialisation de la pompe.



MEDWIN France
9 Allée de la Vigne Grande
34600 Les Aires - FRANCE

Vygon
5 rue Adeline - 95440 ECOUEN - FRANCE
Customer service : +33 1 39 92 64 15
Service commercial France +33 1 39 92 63 13
Fax : +33 1 39 90 29 37
www.vygon.com – questions@vygon.com




DB DIGE 14 235 F - PLINT462 REV. 02/20

easy*lit*6

Pompe à nutrition entérale

Notice d'utilisation simplifiée

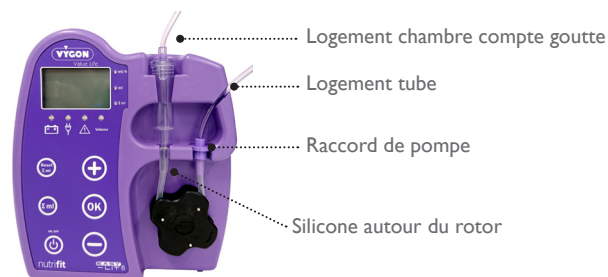

Mise en place de la tubulure

- Vérifier l'intégrité de l'emballage
- Ouvrir et sortir la tubulure du sachet
- Fermer le clamp
- Positionner la chambre compte goutte dans le logement dédié.
- Positionner la partie silicone de la tubulure autour du rotor en veillant à bien positionner le raccord de pompe dans son logement.
- Positionner la tubulure dans l'espace « logement tube ».




Mise en service

-  Démarrer la pompe. Appuyer sur la touche pendant 3 secondes.
-  Si nécessaire, lancer une purge en appuyant simultanément sur les deux touches pendant 3 secondes. La purge dure 1min 35sec et peut être arrêtée à tout moment en appuyant sur la touche .
-  Valider pour passer à l'étape suivante.
-  Programmer le débit.
-  Valider le débit.
-  Programmer le volume à délivrer (zéro = sans dose).
-  Valider le volume à délivrer et commencer la nutrition.
-  Une fois la nutrition terminée (message VOL apparaît à l'écran), éteindre la pompe. Appuyer sur la touche pendant trois secondes.

En cours de nutrition

-  Mettre en pause par un appui prolongé, suspendre les alarmes ou relancer la nutrition (appui simple).
- 
 - Modifier les paramètres de nutrition en mode PAUSE.
 - Verrouiller ou déverrouiller le clavier (appui simultané pendant 3 secondes).
-  Consulter le volume délivré. Le volume cumulé peut être supprimé en mode PAUSE après consultation de la valeur (appui 3 secondes).

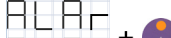AFFICHAGE	ALARMES	SOLUTIONS
 + 	Pré alarme ou Alarme Batterie	Recharger la batterie en la branchant sur le secteur
 + 	Alarme tube	Vérifier et corriger le positionnement du tube silicone ou remplacer la tubulure.
Message écran + 	Pause prolongée > 2 min après une alarme	Appuyer sur  pour arrêter l'alarme puis une nouvelle fois pour relancer la nutrition
 + 	Pause prolongée > 15 min après une alarme	Appuyer sur  pour arrêter l'alarme puis une nouvelle fois pour relancer la nutrition
 + 	Fin de nutrition	Eteindre la pompe ou reprogrammer une séquence de nutrition
 + 	Alarme SAV	Contacter le service SAV

Notes :

- Si le voyant  s'allume, la pompe fonctionne sur batterie.
- Si le voyant  s'allume, la pompe fonctionne sur secteur.
- Bien veiller à recharger régulièrement et totalement la batterie, tout spécialement après un usage prolongé hors secteur.

Important : Lorsque la pompe est en mode PAUSE, le détecteur infrarouge est actif. Si la tubulure est arrachée et que cela entraîne un écoulement libre, alors la pompe détectera cette anomalie en signalant une alarme TUBE.



Pour de plus amples informations, consulter le mode d'emploi.

CE1639