

CRONO PAR III

Pompe à perfusion ambulatoire
pour le traitement de la
maladie de Parkinson

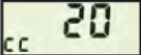
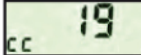
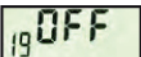
INSTRUCTIONS RAPIDES

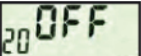
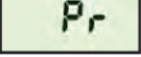
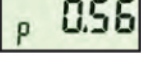
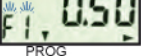


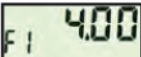
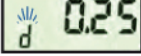
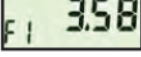
Touches temporisées : l'action doit se prolonger pendant quelques secondes avant que la commande ne soit exécutée.

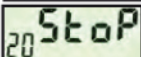
Le résumé des présentes instructions ne se substitue pas à la nécessité de lire les informations données dans le manuel et ne représente qu'une synthèse rapide des fonctions du dispositif.

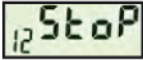
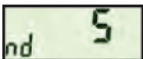
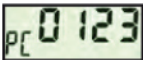
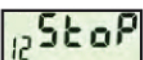
	TOUCHES	PROGRAMMATION EN ÉTAT OFF	ÉCRAN
POMPE SUR OFF		• Pompe sur OFF	
		• Programmation du volume de la dose bolus (de 0,00 à 2,00 ml)	
		• Programmation de l'intervalle entre les doses bolus (de « no,Lt » à 24 heures)	
		• Programmation du débit F1 (de 0,05 à 5,00)	
		• Programmation du débit F2 (de 0,00 à 5,00 - oFF - désactivé)	
		• Programmation du débit F3 (de 0,00 à 5,00 - oFF - désactivé)	
		• Programmation du volume partiel (de 1 à 20 ml) (voir tableau PROGRAMMATION DU VOLUME PARTIEL)	
		• Pompe sur OFF	
	/	• Diminution/augmentation des paramètres précédents	

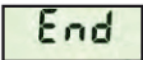
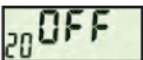
	TOUCHES	PROGRAMMATION DU VOLUME PARTIEL	ÉCRAN
POMPE SUR OFF	 / 	• Programmation du volume partiel • Diminution/augmentation volume partiel • Positionnement du pousseur au volume partiel • Pompe sur OFF	     

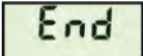
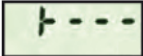
	TOUCHES	MISE EN MARCHÉ/AMORÇAGE	ÉCRAN
POMPE SUR OFF	  (maintenir enfoncé)  	• Pompe sur OFF • Fonction <i>amorçage</i> • Distribution de la dose d'<i>amorçage</i> (1,5 ml max. totale) • Mise en marche de la pompe • Démarrage de la perfusion • Sélection des débits	     

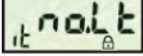
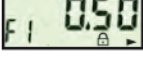
	TOUCHES	ADMINISTRATION DE LA DOSE BOLUS	ÉCRAN
POMPE ALLUMÉE		• Pompe sur ON • Administration de la dose bolus • Pompe sur ON	  

	TOUCHES	ARRÊT/STOP	ÉCRAN
POMPE ALLUMÉE	 	• Durée de la perfusion • Pompe sur StoP • Extinction du signal sonore et clignotement de l'écran	  

	TOUCHES	VERROUILLAGE DU CLAVIER	ÉCRAN
POMPE SUR OFF/StoP		Pompe sur OFF ou sur StoP	   
	 (5 sec)	Affichage du nombre de bolus administrés	
	 (7 sec)	Affichage du nombre de perfusions	
	 appuyer sans relâcher 	Phase de sélection du niveau de verrouillage du clavier	 
	 / 	Sélection de verrouillage/déverrouillage du clavier	
		Pompe sur OFF ou sur StoP	   

	TOUCHES	RETOUR ANTICIPÉ	ÉCRAN
POMPE ALLUMÉE		Pompe sur StoP	
	 + 	Pompe sur End	
		Retour du pousseur	
		Pompe sur OFF	

	TOUCHES	FIN DE LA PERFUSION	ÉCRAN
POMPE ALLUMÉE		• Pompe sur End	
		• Retour du pousueur	
		• Pompe sur OFF	

	TOUCHES	AFFICHAGES	ÉCRAN
POMPE SUR OFF/StoP - L1 		• Pompe sur OFF	
		• Volume de dose bolus	
		• Intervalle entre les doses bolus	
		• Débit F1	
		• Débit F2	
		• Débit F3	
		• Volume partiel	
		• Pompe sur OFF	

Distribué par:

Pentaferte France SAS
3, rue des Entrepreneurs ZAC de l'Ambréris 77270 Villeparisis
Tel: 01-64-67-08-63 Fax: 01-64-67-13-61
contact@pentaferte-france.com



Fabriqué par:

CANÈ S.p.A. Medical Technology
Via Cuornè 42/a 10098 Rivoli (TO) Italie
Tél.+39 011 9574872 - Fax +39 011 9598880
www.canespa.it E-mail : mailbox@canespa.it