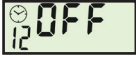
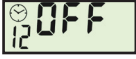
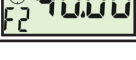


CRONO PAR 30 INSTRUCTIONS RAPIDES EN MODE Auto

Touches temporisées : l'action doit se prolonger pendant quelques secondes avant que la commande ne soit exécutée.

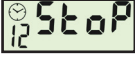
	TOUCHES	SÉLECTION DE LA VERSION DE LA POMPE	ÉCRAN
POMPE SUR OFF	 (maintenir enfoncée)   / 	• Pompe sur OFF Affichage du nombre de bolus administrés (après 2 secondes) • Affichage du nombre de perfusions (après 6 secondes) • Phase de sélection de la version de la pompe (après 10 secondes) • Accès à la phase de sélection de la version de la pompe • Sélection de la version de la pompe (FrEE/Auto) • Pompe sur OFF	     PROG 

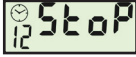
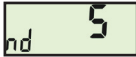
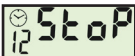
	TOUCHES	MISE EN MARCHE/AMORÇAGE	ÉCRAN
POMPE SUR ON	  (maintenir enfoncé)  	• Pompe sur OFF • Fonction <i>amorçage</i> • Distribution de la dose d'amorçage (1,5 ml disponible) • Pompe sur OFF (dose d'amorçage distribuée ; fonction encore disponible - v.page 70/71 -) • Mise en marche de la pompe • Démarrage de la perfusion • Commutation temporaire de la durée de la perfusion/débit	      

	TOUCHES	ADMINISTRATION DE LA DOSE BOLUS	ÉCRAN
POMPE ALLUMÉE		• Pompe sur ON • Administration de la dose bolus • Pompe sur ON	  

	TOUCHES	PROGRAMMATIONS	ÉCRAN
POMPE SUR OFF		• Pompe sur OFF et L0	
		• Affichage de l'heure	
		• Accès à la phase de Programmation de l'heure et des minutes (5 sec)	
		• Programmation des minutes	
		• Programmation de la dose bolus (de 0,00 à 2,00 ml) (de « no,Lt » à 24 heures)	
		• Programmation de l'intervalle entre les doses bolus	
		• Programmation du débit F1 (de 0,05 à 5,00 ml/h)	
		• Programmation du débit F2 (de 0,05 à 5,00 ml/h)	
		• Programmation du débit F3 (de 0,05 à 5,00 ml/h)	
	et	• Attribution des débits aux 24 heures journalières	
		• Programmation du volume partiel (de 1 à 30 ml) (voir tableau PROGRAMMATION DU VOLUME PARTIEL)	
	/	• Pompe sur OFF (après 20 secondes)	
	/	• Diminution/augmentation des paramètres précédents	

	TOUCHES	PROGRAMMATION DU VOLUME PARTIEL	ÉCRAN
POMPE SUR OFF		• Programmation du volume partiel	
	/	• Diminution/augmentation volume partiel	
		• Positionnement du posseur au volume partiel	
		• Pompe sur OFF	

	TOUCHES	StoP	ÉCRAN
POMPE ALLUMÉE		• Pompe sur StoP	
		• Extinction du signal sonore et clignotement de l'écran	

	TOUCHES	VERROUILLAGE DU CLAVIER	ÉCRAN
POMPE SUR OFF/StoP		• Pompe sur OFF ou sur StoP	
			
	 (2 sec)	• Affichage du nombre de bolus administrés	
	 (5 sec)	• Affichage du nombre de perfusions	
	 appuyer sans relâcher 	• Phase de sélection du niveau de verrouillage du clavier	 
	 / 	• Sélection de verrouillage/déverrouillage du clavier	
		• Pompe sur OFF ou sur StoP	   

	TOUCHES	RETOUR ANTICIPÉ	ÉCRAN
POMPE ALLUMÉE		• Pompe sur StoP	
	 + 	• Retour anticipé	
		• Retour du pousseur	
		• Pompe sur OFF	

TOUCHES	FIN DE LA PERFUSION	ÉCRAN
	• Pompe sur End	
	• Retour du pousseur	
	• Pompe sur OFF	

TOUCHES	AFFICHAGES	ÉCRAN
POMPE SUR OFF/Stop - L	• Pompe sur OFF et L1	
	• Programmation de l'heure	
	• Dose bolus	
	• Intervalle de temps entre les bolus	
	• Débit F1	
	• Débit F2	
	• Débit F3	
	• Débits dans les 24 heures journalières	
	• Affichage des débits dans les 24 heures journalières	
	• Volume partiel	
	• Pompe sur OFF	

RECOMMANDATION



Le résumé des présentes instructions ne se substitue pas à la nécessité de lire les informations fournies dans ce manuel et ne représente qu'une synthèse rapide des fonctions du dispositif.

Distribué par:

PENTAFERTE FRANCE SAS

3, rue des Entrepreneurs ZAC de l'Ambrésis 77270 Villeparisis

Tel: 01-64-67-08-63 - Fax: 01-64-67-13-61

contact@pentaferite-france.com



CANÈ S.p.A. Medical Technology

Via Cuornè 42/a 10098 Rivoli (TO) Italie

Tél.+39 011 9574872 - Fax +39 011 9598880

www.canespa.it E-mail : mailbox@canespa.it