
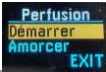


Ne substitue pas au mode d’emploi complet Constructeur

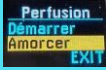

Purger la tubulure

TOUCHES	AFFICHAGE	ECRAN
Appui sur: 	Pompe sur Démarrer	
Appui sur: 	Pompe sur Amorcer	
Appui sur:  pour purger la ligne de perfusion	Pompe en cours de purge (0.2 ml)	 puis 
Répéter l'opération si nécessaire		

Démarrer la perfusion

TOUCHES	AFFICHAGE	ECRAN
Une fois la purge effectuée	Pompe sur Démarrer	
Appui sur: 	Pompe en cours de perfusion	


Mettre la pompe en pause

TOUCHES	AFFICHAGE	ECRAN
Appui sur: 	Pompe sur Stop	
Appui sur: 	Pompe en STOP	

Changement de réservoir (si avant la fin de perfusion)

TOUCHES	AFFICHAGE	ECRAN
Appui sur: 	Pompe en cours de perfusion	
Appui sur : 	Pompe sur STOP	
Appui sur: 	Pompe sur Retour pousseur	
Appui sur: 	Pompe sur NON	
Appui sur : 	Pompe sur OUI	
Appui sur: 	Retirer l'aiguille	
Appui sur: 	Retour pousseur	

Programmation

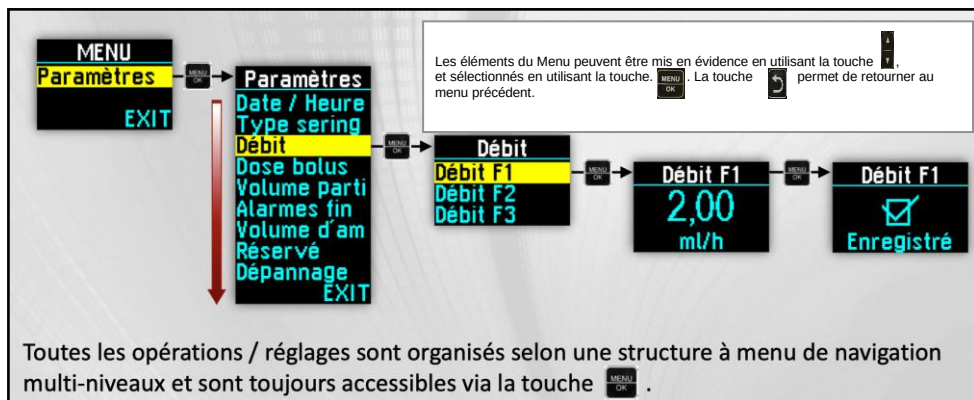

Modification des paramètres en cours de perfusion

TOUCHES	AFFICHAGE	ECRAN
Appui sur:	Pompe sur Stop	
Appui sur:	Pompe en STOP	
Appui sur:	Pompe sur Paramètres	
Appui sur:	Pompe sur Paramètres	
Appui sur:	Pompe sur le menu déroulant	(voir programmation des plages horaires)
Choisir son paramètre et le modifier. Se reporter à Programmation.		

Programmation des plages horaires (Si Auto)

TOUCHES	AFFICHAGE	ECRAN
Appui sur: puis avec   sélectionner Débits horaires	Pompe sur le menu déroulant	
Appui sur: 	Pompe sur Débits horaires rentrer la valeur de chaque débit et valider par 	
Appui sur: 	Pompe sur Horaires	
Appui sur: 	Pompe sur les Plages horaires	
Appui sur: 	Pour sélectionner votre heure début (toujours à partir de minuit=00) et de fin puis faites correspondre le débit correspondant	